

B. Braun Meshes I-STOP®

Univerzální páska pro léčbu
ženské i mužské inkontinence



Vysoce stabilní páska

I-STOP®

Páska I-STOP® je určena k léčbě ženské a mužské stresové inkontinence moči

Vysoce stabilní páska

- Monofilní vlákno ze 100% polypropylénu
- Široké póry
- Nekrotí se
- Flexibilní, bez paměťového efektu
- Atraumatické okraje
- Velmi lehká

Všechny přístupy:

- Transobturatorní přístup zvenku-dovnitř s Emmetovými jehlami
- Transobturatorní přístup zvenku-dovnitř se spirálovými jehlami
- Transobturatorní přístup zevnitř-ven
- Retropubický přístup zdola-nahoru
- Retropubický přístup shora-dolů
- Zadní (posterioerní) přístup

Ověřená inovace

- *"Léčba ženské močové inkontinence suburetrální páskou. Stanovení morbidit u transobturatorní cesty zavedení při použití nového druhu pásky (I-STOP®): multicentrická studie 604 případů"*

European Urology - 2004

KRAUTH Jean-Sébastien, RASOAMIARAMANANA Haingo, BARLETTA Hugues, BARRIER Pierre-Yves, GRISARD-ANAF Maryelle, LIENHART Jean, MERMET Jacques, VAUTHERIN Renaud, FROBERT Jean-Luc

- *"Perioperační komplikace a bolest při léčbě stresové močové inkontinence suburetrální páskou: francouzská randomizovaná multicentrická studie porovnávající retropubický a transobturatorní přístup"*

European Urology - 2006

DAVID-MONTEFIORE Emmanuel, FROBERT Jean-Lois, GRISARD-ANAF Maryelle, LIENHART Jean, BONNET Karine, PONCELET Christophe, DARAI Emile

- *"Inkontinence po prostatektomii – Transobturatorní zavedení pásky I-STOP™ u mužů jako nová možnost léčby"*


EUROPEAN RENAL & GENITO-URINARY DISEASE 2006

GRISE Philippe


Univerzální přístup

Katalog č.: 1066520

1x páska I-STOP® Tape
+ 2 retropubické jehly
+ 2 Emmetovy jehly + 2 rukojeti
Souprava pro jednorázové použití

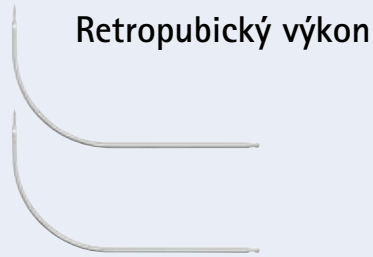

Transobturatorní výkon zvenku-dovnitř

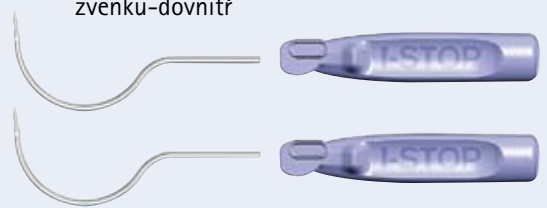


Transobturatorní přístup

zvenku-dovnitř

Katalog č.: 1066540

1x páska I-STOP® Tape
+ 2 Emmetovy jehly
+ 2 rukojeti + 2 spirální zavaděče
Souprava pro jednorázové použití

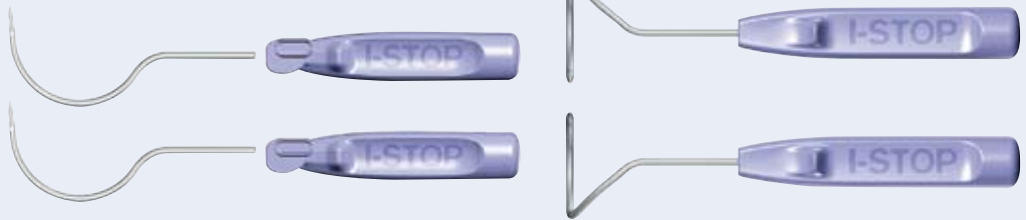


Retro-obturatorní přístup

zvenitř-ven

Katalog č.: 1066560

1x páska I-STOP® Tape
+ 2 retroobturatorní jehly
+ 2 rukojeti
Souprava pro jednorázové použití

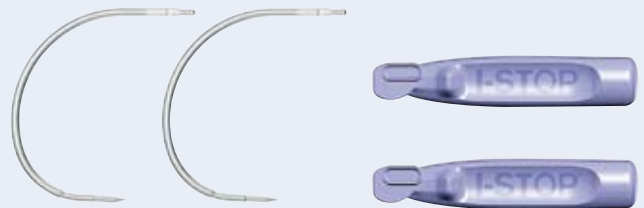

Vlastnosti výrobku

Materiál	Polypropylénové monofilní vlákno
Struktura	Pletenina
Hmotnost	50 g/m ²
Velikost pórů	≥ 0,075 mm až 1,1 mm
Indikace	I-STOP® je pubo-uretrální páska určená k operačnímu řešení ženské i mužské močové inkontinence
Kontraindikace	Pásku I-STOP® nelze použít u těhotných pacientek, pacientek s močovou nebo vaginální infekcí nebo u pacientek s jakoukoliv kontraindikací chirurgického výkonu
Sterilizace	Páska: etylénoxid Nástroje: gama záření



AESCULAP®

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical s.r.o.
Divize Aesculap

V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 111
Fax +420-271 091 112
e-mail: info@bbraun.cz
www.bbraun.cz

Všechna práva vyhrazena. Technické změny jsou možné.
Tento informační materiál nesmí být použit k jiným účelům, než je nabídka, nákup a prodej našich výrobků. Žádná jeho část nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována. V případě zneužití si vyhražujeme právo naše katalogy a ceníky odebrat a učinit příslušné právní kroky.